

HIRASAWA

TIME TAPE  
LABELING SYSTEM  
FOR LABORATORY

**TIME** 理科学用タイム・テープ・ラベリング・システム







## カラー・テープ *Color Tape*

### ■タイム・テープ

#### ■高級サテン紙使用

丈夫でやわらかな素材を使用しておりますので、どんなところにもよく貼り付き、はがすときにも破れません。

#### ■カラーは12色、巾は5種類、長さは2種類

巾は5種類、それぞれに12色を用意しております。1巻の長さは13mと55mです。類似品が1巻5mなのに対して長い分、1m単価がお得です。

#### ■耐熱性特殊糊使用

-90~180℃まで耐えられる特殊糊を使用しております。貼付された状態でフリーザーからオートクレーブ滅菌まで可能です。

#### ■一度はがしても再度貼りなおし可能

汚れのない乾いた表面であれば、どんなものにもよく貼ることができますし、また、はがして別の場所に貼りかえることも可能です。例えばオートクレーブ滅菌にかけても常温に戻れば指ではがすことができ、はがしたあとに糊も残りません。

#### ■書き込み可能

鉛筆、ボールペン、油性サインペンなどではっきりと書き込みができます。

### SPECIFICATIONS

#### タイム・テープ/仕様

- 長さ : 13m  
(13/20mmには55mもあります)
- 巾 : 13/20/25/38/50mm
- 主材料 : 高級サテン紙 (表面コーティング加工)
- 糊 : 耐熱性特殊糊
- 耐熱温度 : -90~180℃
- 対象物 : ガラス/金属/プラスチック/  
塩化ビニール/ポリエチレン/  
木製品/その他  
(対象面に汚れがなく乾いていること)
- 書き込み : 鉛筆 (Bタイプ)・ボールペン・  
油性サインペンなどで可能





■タイム・テープ

Cat. No.表													
巾・長さ	シロ	キ	ミドリ	アカ	アオ	オレンジ	ピンク	ウスチャ	ウスアオ	スマレ	キミドリ	クロ	
13mm×13m	5210	5211	5212	5213	5214	5215	5216	5217	5218	5219	521A	521B	
20mm×13m	5220	5221	5222	5223	5224	5225	5226	5227	5228	5229	522A	522B	
25mm×13m	5230	5231	5232	5233	5234	5235	5236	5237	5238	5239	523A	523B	
38mm×13m	5260	5261	5262	5263	5264	5265	5266	5267	5268	5269	526A		
50mm×13m	5270	5271	5272	5273	5274	5275	5276	5277	5278	5279	527A		
13mm×55m	5290	5291	5292	5293	5294	5295	5296	5297	5298	5299			
20mm×55m	5240	5241	5242	5243	5244	5245	5246	5247	5248	5249			

## テープ・ホルダー *Tape Holder*

### ■多連式テープ・ホルダー

#### ■タイム・テープの多連ホルダーがあります

多連ホルダーを4種類販売しています。13mm巾のテープ13巻用の標準型が3種と7巻用の小型が1種あります。

#### ■材質はプラスチック製です

プラスチック製で、各製品とも使い易く、又「きれい」なデザインです。  
是非、タイム・テープとともにお使い下さい。

#### ■他のテープにも使えます

他の種類のタイム・テープ、市販のテープにも使用できます。



■テープ・ホルダー

Cat. No.表			
5208	多連式ホルダー	13m巻用	〈写真左側〉
W255×D105×H75mm		プラスチック製 白色	
※13mm巾13巻／20mm巾10巻／25mm巾8巻／38mm巾5巻／50mm巾4巻までホールドできます。			
5207	多連式ホルダー ミニ	13m巻用	〈写真右側〉
W148×D105×H75mm		プラスチック製 白色	
※13mm巾7巻／20mm巾5巻／25mm巾4巻／38mm巾3巻／50mm巾2巻までホールドできます。			
5201-P	1巻式ホルダー	13m巻用	〈写真右下側〉
W46×D115×H90mm		プラスチック製 白色	
※13mm巾2巻／20mm巾1巻／25mm巾1巻			



## 滅菌用テープ *Autoclave Tape*

### ■オートクレーブ・テープ

#### ■121℃15分でインジケーターが発色

耐熱性に隠されたインジケーターは、121℃/15分で発色を始めて『AUTOCLAVED』の文字が濃くなります。

#### ■耐熱性のある紙と糊を使用

耐熱性の特殊な紙と耐熱性の糊を使用して、滅菌の行程ではがれることはありません。包装して滅菌する場合にはテープ兼用で使用できます。

#### ■紙表面に書き込み可能

鉛筆、ボールペン、サインペンなど内容物名滅菌年月日など必要に応じ記載できます。

滅菌前



滅菌後



### ■オートクレーブ・テープ

Cat. No.表

5331 オートクレーブ・テープ 巾：20mm 13m巻 耐熱温度0～180℃ 袋入り

## 超耐熱テープ *High Low Temp. Tape*

### ■ハイローテンプ・テープ

#### ■超低温から高温まで


特殊硝子繊維と、耐温度性に優れた特殊糊とを使用し、-196～+390℃までの広い温度範囲で使用できます。

#### ■テープ巾は3種類あります

テープ巾は13/20/25mmの3種があります。用途に応じてお選び下さい。

#### ■テープに書き込み可能

鉛筆、ボールペン、サインペンなど内容物名滅菌年月日など必要に応じ記載できます。

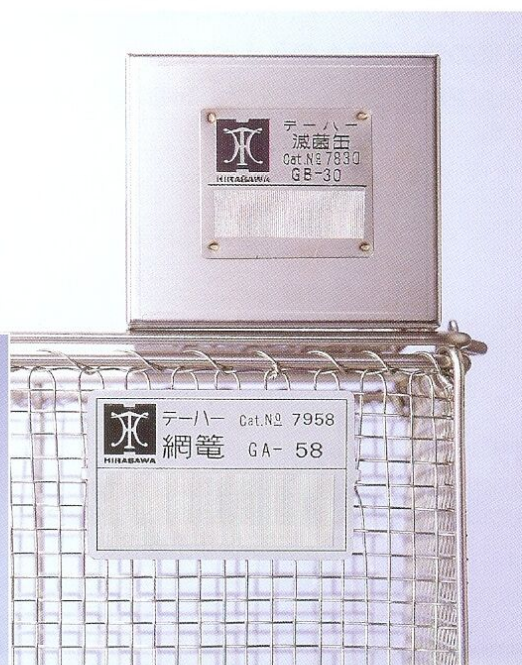

●滅菌表示はありません。

### ■ハイローテンプ・テープ

Cat. No.表

5361	ハイローテンプ・テープ	巾：13mm	13m巻	耐熱温度0～180℃	袋入り
5362	ハイローテンプ・テープ	巾：20mm	13m巻	耐熱温度0～180℃	袋入り
5363	ハイローテンプ・テープ	巾：25mm	13m巻	耐熱温度0～180℃	袋入り



## その他のテープとラベル

### ■ インストロマーク・テープ

#### ■ 巾は10mm、やわらかな素材を使用

曲面や角面などでもきれいに貼ることができます。又、細くて使用時などでも邪魔になりません。解剖用具や研究器具、文具などの分類に最適です。

#### ■ カラーは8色あります

テープの色は8色を用意しております。洗浄や蒸気滅菌でも色はあせません。最適です。

#### ■ 耐熱ビニール及び特殊糊を使用

0～121℃でも使用できます。



#### ■ インストロマーク・テープ

Cat. No.表		
インストロマーク・テープ	シロ	5250
●テープ巾：10mm	キ	5251
●テープ長：5m	ミドリ	5252
●テープ材：耐熱ビニール	アカ	5253
●耐熱温度：0～121℃	アオ	5254
	オレンジ	5255
	チャ	5257
	クロ	5259

### ■ スライド/エンドラベル

#### ■ スライドガラスにピッタリのサイズです

スライドガラスにエッジをとってきれいに貼ることができます。正方形のタイプ〈スライド・ラベル〉と長方形のタイプ〈エンド・ラベル〉とが有ります。

#### ■ ロール型とシート型の2種類があります

ロール型は特殊のパッケージで、台紙を引くと台紙から1枚ずつ剥がれて出てきます。

スライドガラスに貼って文字を書くのに便利です。


シート型は1枚の台紙にスライド・ラベル40枚、エンド・ラベル80枚が付いています。

シート状のまま1度に続けて書き込むのに便利です。

- 主材料：上質紙
- 糊：恒久接着糊
- 耐熱温度：0～90℃
- 書き込み：鉛筆(Bタイプ)・ボールペン  
油性サインペン など

#### ■ スライド/エンドラベル

Cat. No.表		
●スライド・ラベル	Cat. No. 5121	ロール型
	Cat. No. 5122	シート型
●エンド・ラベル	Cat. No. 5131	ロール型
	Cat. No. 5132	シート型

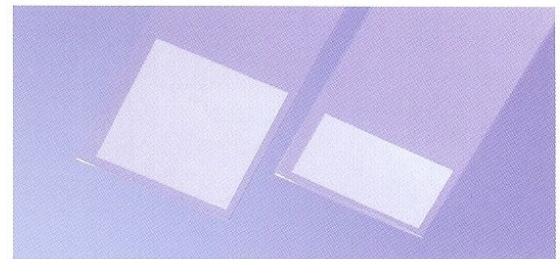




人の目は文字よりも色を素早く識別します。

その考えを基本として、実験・研究者専用  
米国にて開発されたテープ&ラベル類が、  
タイム・テープ・ラベリング・システムです。

種々の色、大きさ、糊の種類、材質のテープと  
ラベルをご用意しております。

タイム・テープ・ラベリング・システムは、  
あなたの作業能率を上げ、ミスを防ぎ、  
そして作業環境を美しく衛生的に整えます。

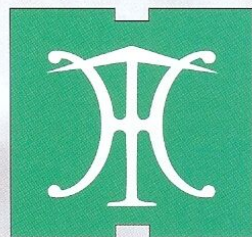

**HIRASAWA**

## 株式会社ヒラサワ

本社：〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目24-7  
TEL.03-3834-2331 FAX.03-3836-1140  
大阪営業所：〒559-0024 大阪市住之江区新北島2-2-49-206  
TEL.06-6683-7061 FAX.06-6683-7062